

Sistema de Cifoplastía Percutánea

CARACTERÍSTICAS

- Cifoplastia mínimamente invasiva.
- Corrige la altura vertebral.
- Contenedor de cemento óseo elipsoidal: encaja en la cavidad vertebral y previene filtraciones de cemento.




CIFOPLASTIA CONVENCIONAL POR INYECCIÓN DIRECTA DE CEMENTO ÓSEO



Acceso óseo



Se infla el balón con fluido

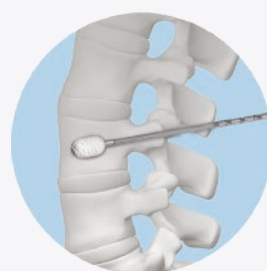

El cemento óseo se inyecta directamente

NUEVA CIFOPLASTIA POR INYECCIÓN A TRAVÉS DE CONTENEDOR DE CEMENTO ÓSEO



Acceso óseo



Se inyecta el recipiente de cemento óseo (el globo o el dilatador pueden usarse primero para restaurar la altura vertebral)



El cemento óseo se inyecta a través del contenedor de cemento óseo















INDICACIONES

- VCF reciente sin lesiones en el nervio
- VCF mayor a 6 meses, con cifosis severa y dolor de espalda correlativo
- VCF múltiple en segundo lugar a VCF simple por osteoporosis
- VCF patológicos, como tumores benignos o malignos

CONTRAINDICACIONES

- Fractura por estallido vertebral con lesión nerviosa
- No se puede tolerar la operación por insuficiencia cardíaca grave, hepatitis o insuficiencia renal
- VCF con dislocación articular facetaria
- Osteomielitis o infección del sistema
- Hiperlipemia con registro de embolización vascular
- Mujeres embarazadas
- Alergia a cemento óseo o instrumentales

Sistema de Cifoplastía Percutánea

INSTRUMENTAL	CÓDIGO	MEDIDAS		IMAGEN
Balón	71711512	15	120	
Contenedor de cemento óseo	71722012	20	120	
Trocar	71750203	B	3.0*120	
Alambre guía	71750300	-	-	
Pasador guía	71750400	-	-	
Expansor	71750503	-	4.2*120	
Broca	71750605	-	3.5*120	
Expansor de trocar	71750805	B	4.2*120	
Biopsia	71750905	-	3.4*120	
Distractor	71751100	-	-	
Sistema de carga de cemento óseo	71751405	A	3.4*120	
Barra de empuje	71751901	-	120	
Inyector de cemento óseo	71752505	5ml	-	
Bomba	71751300	-	-	
Cemento óseo	71700000	20g	-	