

PLACA OSTEOTOMÍA DE CALCÁNEO

OVERFIX®



Descripción


- La placa posee un orificio que brinda espacio para la colocación injerto óseo. Facilita el proceso de la oseointegración.
- Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.8 mm).
- La placa posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.
- Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.
- Su diseño anatómico se adapta en forma perfecta al calcáneo sin necesidad de moldearla.
- Su diseño de alta resistencia permite una rápida realización de ejercicios.



Tornillos

2.7 mm y 3.0 mm.

Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.

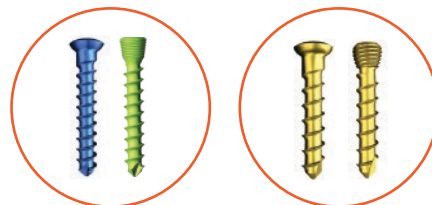

Placa

	COD	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS
	10812-005	Placa Bloqueada para Osteotomía de Calcáneo	5