

bioadvance



CADERA NO CEMENTADA PRIMARIA



AK-MP-TP

Vástago Femoral No Cementado (132°)

Características

El vástago MP-TP es un diseño no cementado que sigue la filosofía clásica de vástago cónico. El extremo distal pulido en forma de bala reduce la tensión en el canal femoral distal.

El vástago MP-TP es una aleación de titanio forjado de alta resistencia e incorpora un cono de dos planos de 3 grados.

Cada vástago tiene una geometría, ensanchado lateralmente y en sentido medial redondeada. De sección transversal proximal refinada para tener un ajuste óptimo de llenado y estabilidad rotacional.


Su recubrimiento es 1/3 Proximal en Plasma Spray y 2/3 distales en Blasting.

bioadvance



AK-MP-TP Vástago Femoral No Cementado (132°)

Descripción	REF	Código REF	Diámetro Distal (D)	Longitud del Vástago (C)	Offset (B)	Ángulación del Cuello (A)
AK-MP-TP Vástago Femoral No Cementado (132°) English: AK-MP-TP Femoral Stem (132°) Material: Aleación deTitanio Superficie recubierta de: Titanio / PlasmaSpray Cono: 12/14	7 #	1100-2007	7mm	110	39	132°
	8 #	1100-2008	8mm	115	39	
	9 #	1100-2009	9mm	120	40	
	10 #	1100-2020	10mm	130	40	
	11 #	1100-2011	11mm	130	42	
	12 #	1100-2012	12mm	140	44	
	13 #	1100-2013	13mm	150	45	
	14 #	1100-2014	14mm	150	45	

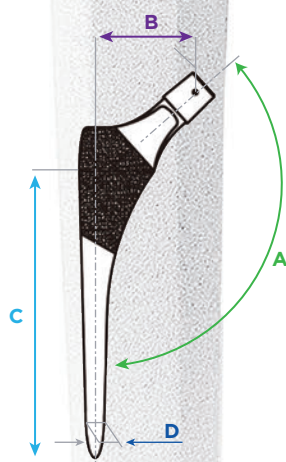

AK-ACP

Vástago Femoral Cementado

Características

La filosofía de diseño de doble cono proporciona fuerzas de compresión naturales para asegurar que el implante se encuentre asentado firmemente colocado dentro del manto de la capa de cemento.

Superficie pulida diseñada para trabajar en conjunto con la geometría cónica mejorando la estabilidad del vástago.

La simplicidad de la técnica quirúrgica permite utilizarlo en deficiencias y deformidades femorales que de otra manera requieren de un enfoque trans-trocantérico y colocar un tallo recto no cementado para corregir la deformidad.

Minimiza el riesgo de fracturas peri-protésicas debido a que no es necesario impactarlo.

Elimina la necesidad de fresar el hueso para adaptarlo a un tallo específico.



Centralizador



Tapón Medular

bioadvance



AK-ACP Vástago Femoral Cementado

Descripción	REF	Código REF	Longitud del Vástago	Angulación del Cuello
ACP Vástago Femoral Cementado English: ACP Cemented Femoral Stem Material: Co-Cr-Mo Superficie: Pulido Espejo Cono: 12/14	00#	1100-1100	105	132°
	0#	1100-1000	110	
	1#	1100-1001	115	
	2#	1100-1002	115	
	3#	1100-1003	120	

AK-L-II-UHMWPE | AK-L-II-HXLPE

Liners



Características

Los Liners están diseñados para impactarse dentro del shell a través de un anillo circunferencial que embona en la ranura de unión del metálico.

Se puede lograr una estabilidad rotacional cuando las cejas antirotacionales del shell se anclan en las cejas del inserto.

El diseño de cejas permite impactar el inserto en 12 posiciones distintas.



AK-L-II-Liner UHMWPE

Descripción	REF	Código REF	Diámetro de Copa	Compatible con Cabeza Femoral
AK-L-II-Liner UHMWPE	34/22	2327-3422	42	22
	36/22	2327-3622	44	
	38/28	2327-3828	46	
	40/28	2327-4028	48	
	42/28	2327-4228	50	28
	44/28	2327-4428	52	
	46/28	2327-4628	54	
	48/28	2327-4828	56	
English: AK-L-II-Liner UHMWPE	50/28	2327-5028	58	32
Material: UHMWPE	52/28	2327-5228	60	
	54/28	2327-5428	62	
	42/32	2327-4232	50	
	44/32	2327-4432	52	
	46/32	2327-4632	54	
	48/32	2327-4832	56	
	50/32	2327-5032	58	
	52/32	2327-5232	60	
	54/32	2327-5432	62	

AK-L-II-Liner HXLPE · Polietileno Cross Linked

Descripción	REF	Código REF	Diámetro de Copa	Compatible con Cabeza Femoral
AK-L-II-Liner HXLPE	34/22	2329-3422	42	22
	36/22	2329-3622	44	
	36/28	2329-3628	44	
	38/28	2329-3828	46	
	40/28	2329-4028	48	28
	42/28	2329-4228	50	
	44/28	2329-4428	52	
	46/28	2329-4628	54	
	48/28	2329-4828	56	
	50/28	2329-5028	58	
	52/28	2329-5228	60	
	54/28	2329-5428	62	
English: AK-L-II-Liner HXLPE Material: Cross Linked	42/32	2329-4232	50	32
	44/32	2329-4432	52	
	46/32	2329-4632	54	
	48/32	2329-4832	56	
	50/32	2329-5032	58	
	52/32	2329-5232	60	
	54/32	2329-5432	62	
	46/36	2329-4636	54	36
	48/36	2329-4836	56	
	50/36	2329-5036	58	
	52/36	2329-5236	60	
	54/36	2329-5436	62	
	56/36	2329-5636	64	
	58/36	2329-5836	66	
	60/36	2329-6036	68	

AK-AC-II-TP

Copa Acetabular

Características

El sistema AK-AC-II-TP es un diseño compuesto de dos piezas que se ensambla durante la cirugía. Los shells (metálicos) utilizan un sistema de seguridad de impactación.

Este sistema de seguridad exclusivo ayuda a proporcionar una interfaz segura entre el inserto de polietileno y el shell.

Los shell también son idóneos para el liner de cross linked y de cerámica.

bioadvance



AK-AC-II-TP Copa Acetabular

Descripción	REF	Código REF	Diámetro Externo	Diámetro Interno
AK-AC-II-TP Copa Acetabular English: AK-AC-II-TP Acetabular Cup Material: Titanio Superficie: Titanio Plasma Spray	42/34	A2438-4234	42	34
	44/36	A2438-4436	44	36
	46/38	A2438-4638	46	38
	48/40	A2438-4840	48	40
	50/42	A2438-5042	50	42
	52/44	A2438-5244	52	44
	54/46	A2438-5446	54	46
	56/48	A2438-5648	56	48
	58/50	A2438-5850	58	50
	60/52	A2438-6052	60	52
	62/54	A2438-6254	62	54
	64/54	A2438-6454	64	54

AK-CP-II

Copa Acetabular UHMWPE




Características

- Diseño de pared posterior de 10°
- Previene la luxación.
- Disponibles para Cabeza 22 y 28.

bioadvance



AK-CP-II Copa Acetabular

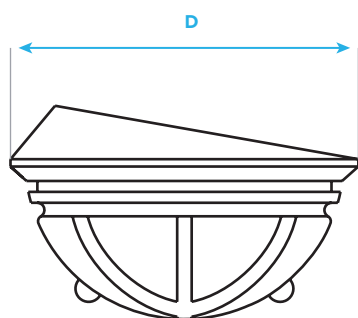

Descripción	REF	Código REF	Diámetro Externo (D)	Compatible con Cabeza Femoral
AK-CP-II Copa Acetabular English: AK-CP-II Acetabular Cup Material: UHMWPE	38/22	2300-1038	36	22
	40/22	2300-1040	38	
	42/22	2300-1042	40	
	44/28	2300-1044	42	28
	46/28	2300-1046	44	
	48/28	2300-1048	46	
	50/28	2300-1050	48	
	52/28	2300-1052	50	
	54/28	2300-1054	52	
	56/28	2300-1056	54	
	58/28	2300-1058	56	
	60/28	2300-1060	58	
	62/28	2300-1062	60	

AK-Bipolar

Copa Bipolar




Características

- Material de aleación de CoCrMo e interior de UHMWPE.
- El anillo interno de seguridad asegura una fácil impactación de la cabeza femoral y previene la luxación.
- Disponible para cabezas de 22mm y 28mm.

bioadvance



AK-Copa Bipolar

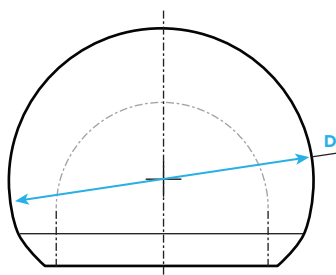

Descripción	REF	Código REF	Diámetro Externo (D)	Compatible con Cabeza Femoral
AK- Copa Bipolar	38/22	1220-3822	38	22
	40/22	1220-4022	40	
	42/22	1220-4222	42	
	44/22	1220-4422	44	
English: AK-Bipolar Cup	46/28	1220-4628	46	28
	48/28	1220-4828	48	
	50/28	1220-5028	50	
	52/28	1220-5228	52	
	54/28	1220-5428	54	
	56/28	1220-5628	56	
Material: Co-Cr-Mo + UHMWPE				

AK-FH-M

Cabeza Femoral




Características

- Material de aleación de CoCrMo.
- Opciones de diámetro de 22mm, 28mm, 32mm.
- Disponible en diferentes longitudes de cuello.



AK-FH-M Cabeza Femoral

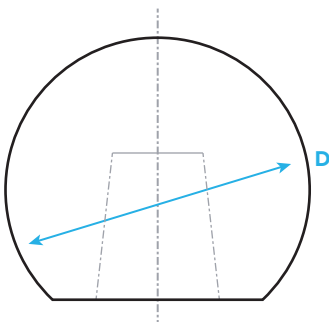

Descripción	REF	Código REF	Compatibilidad Liner con Cabeza Femoral	Diámetro Externo (D)
AK-FH-M Cabeza Femoral English: AK-F-H-M Femoral Head Material: Co-Cr-Mo	22/0	1200-0122	22/0	22
	22/+4	1200-0222	22/+4	
	28/-4	1200-0028	28/-4	28
	28/0	1200-0128	28/0	
	28/+4	1200-0228	28/+4	
	28/+8	1200-0328	28/+8	
	32/-4	1200-0032	32/-4	32
	32/0	1200-0132	32/0	
	32/+4	1200-0232	32/+4	

Tornillos

Fijación Acetabular



Características

- Elaborado de Aleación de Ti y Rosca Esponjosa.
- Cabeza hexagonal.

bioadvance





Tornillo para Fijación Acetabular

Descripción	REF	Código REF	Longitud	Diámetro
Tornillo para Fijación Acetabular English: Acetabular Cup Screw Material: Titanio	15mm	1300-2015	15mm	6.5
	20mm	1300-2020	20mm	
	25mm	1300-2025	25mm	
	30mm	1300-2030	30mm	
	35mm	1300-2035	35mm	
	40mm	1300-2040	40mm	




Set AK-MP-TP | Set AK-AC-II


Instrumental Quirúrgico

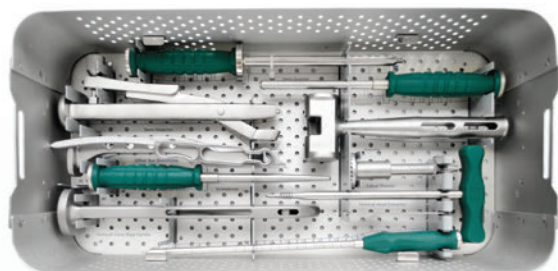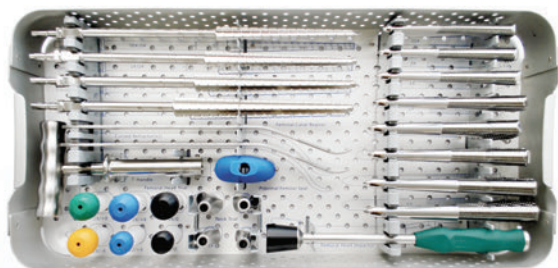


Instrumental para Vástagos MP-TP / MF / ACP

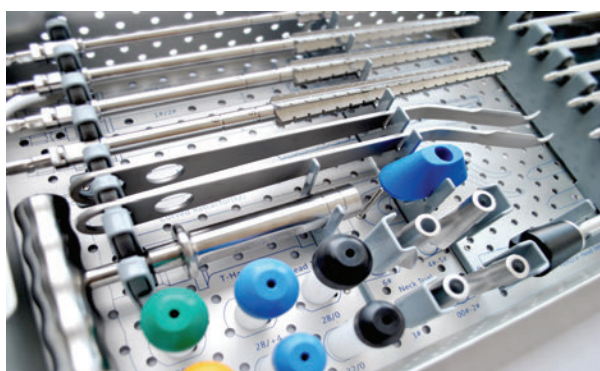

Instrumental para Copas Cementadas
y Copas No Cementadas
AK-AC-II-TP y AK-AC-II-TTM

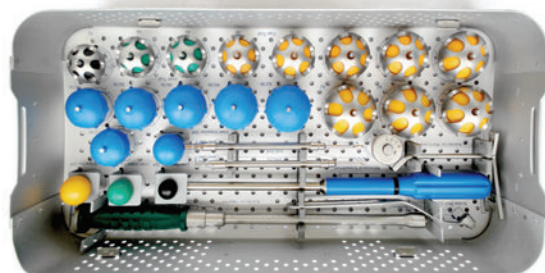

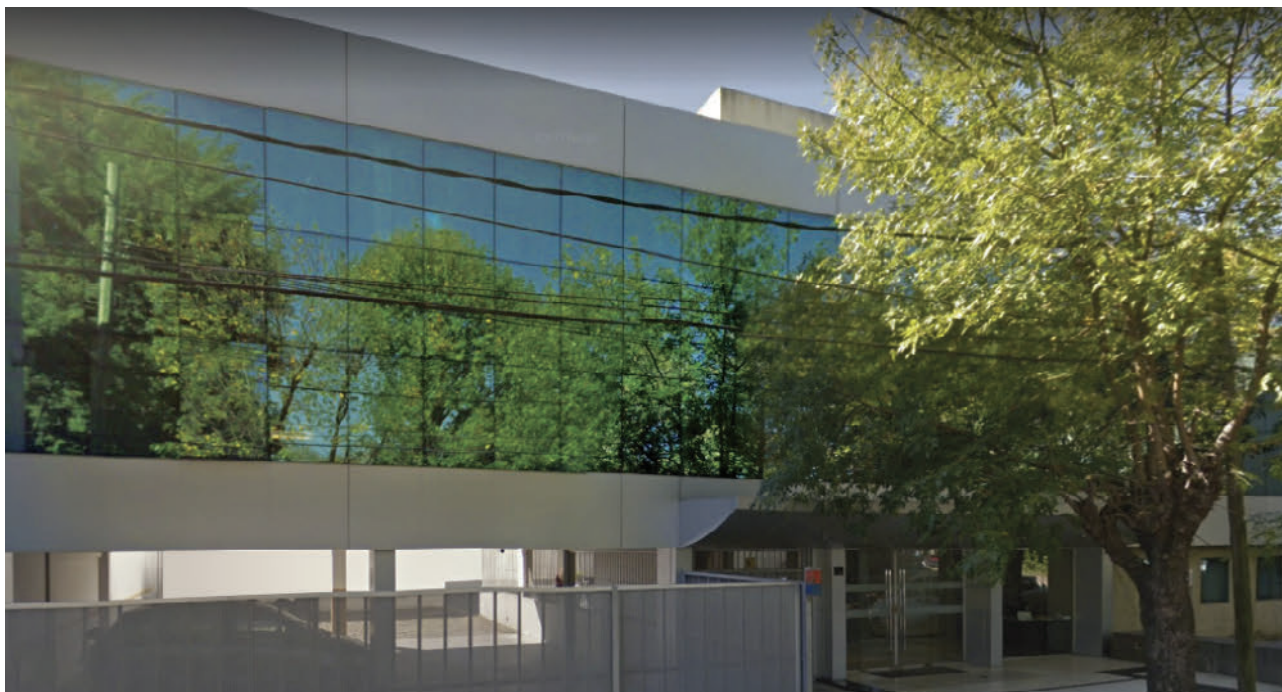

OFICINAS DE BIOADVANCE ARGENTINA

BIOADVANCE

Con más de 11 años dedicados al servicio de la salud, ofrecemos las gamas más completas de prótesis, implantes e instrumentales para traumatología, neurocirugía y artroscopía. Nos destacamos por nuestro servicio, dispositivos de calidad y costos competitivos a nivel global.

Nuestros productos cumplen con los más altos estándares internacionales de acuerdo a las certificaciones y registros sanitarios vigentes. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización de nuestros dispositivos. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Desde nuestra sede operativa en Estados Unidos, y filiales en México y Argentina, prestamos soluciones médicas a toda Latinoamérica. Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el distribuidor más cercano a su ubicación.



Heriberto Frias 1104-302
Colonia del Valle, CP 03100
CDMX



+52 1 5925 5323
info@bioadvance.com.mx
bioadvance.com.mx